



Manuel d'utilisation du lecteur DSC-BLU

1. Installation du logiciel sous Windows 10 et 11


Téléchargez (<https://www.sensyl.fr/fichiers/dsc-blu/setup.exe>) et exécutez le fichier.

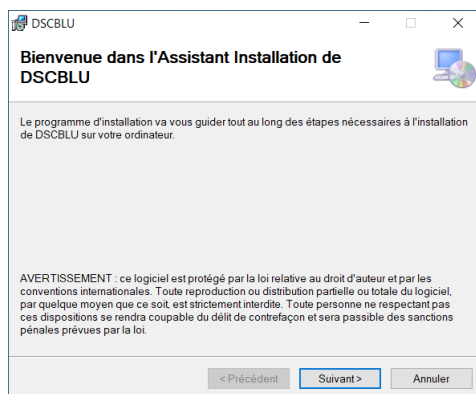

Cliquez sur « Suivant »

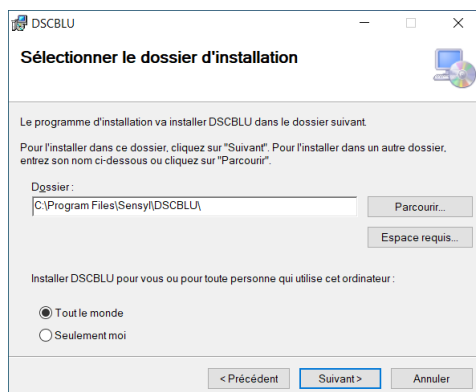


Cliquez sur « Suivant »

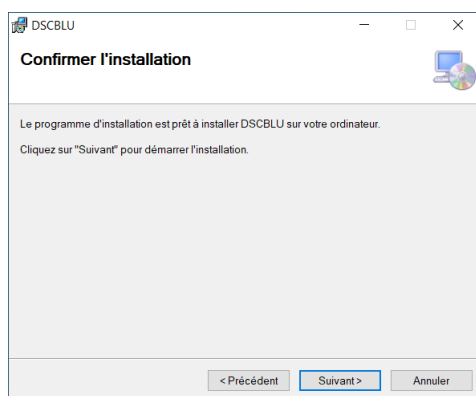

Cliquez sur « Suivant »




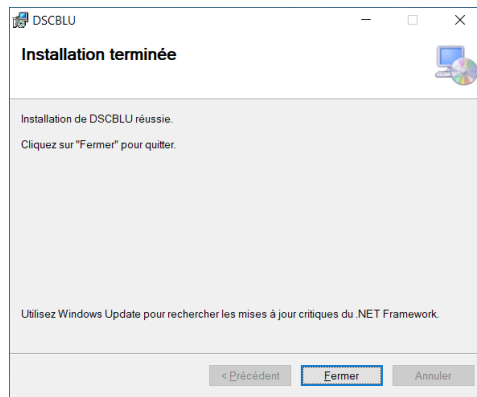

Cliquez sur « Fermer »


2. Vérification de l'installation

Si l'installation s'est déroulée correctement, vous devez avoir une nouvelle icône dans la zone de notification avec la mention « non connecté » et un raccourci vers l'application DSCBLU sur le bureau de Windows.

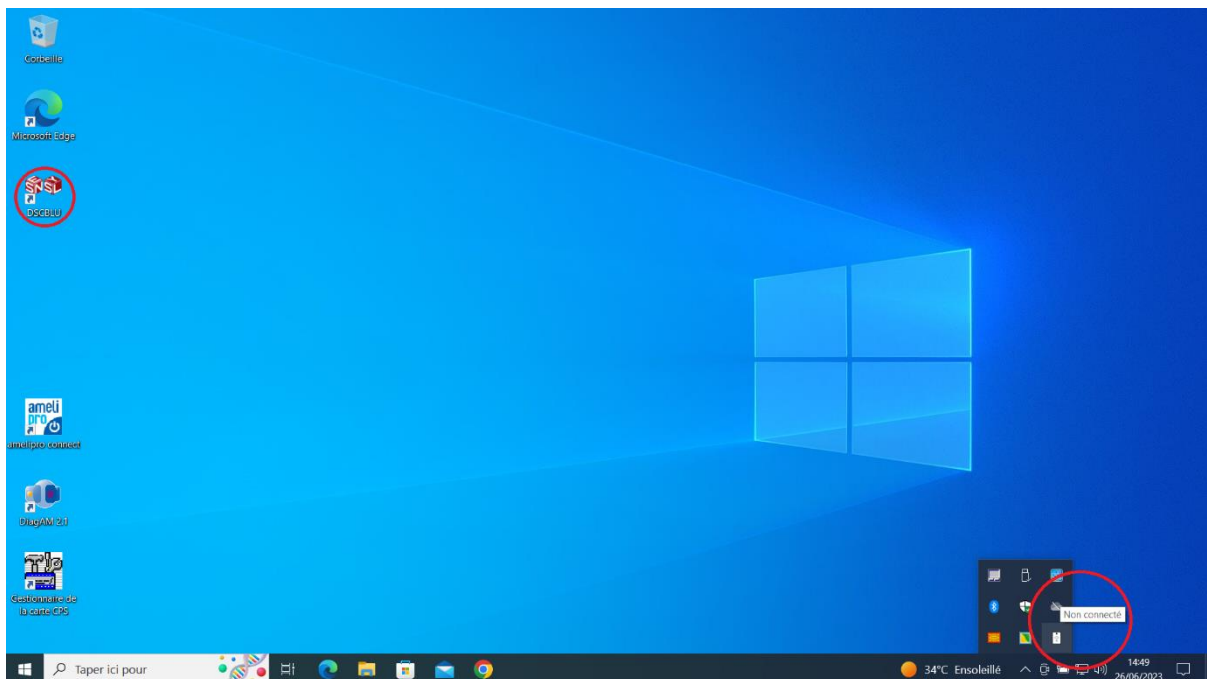

Vous pouvez également vérifier avec DIAGAM (téléchargeable [ici](#)) que les deux lecteurs PCSC sont présents :



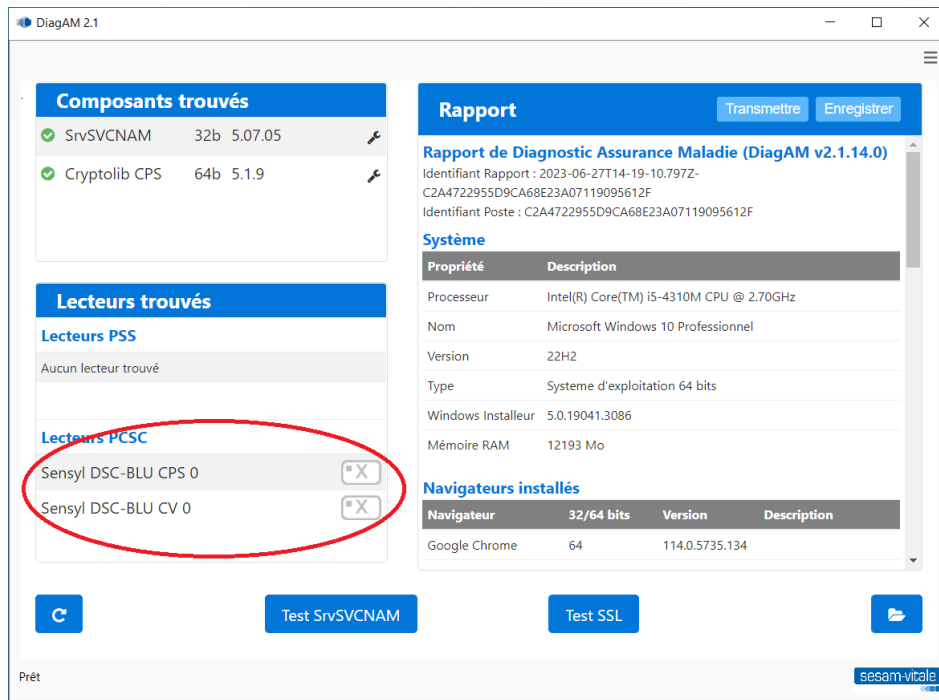

3. Présentation de l'application DSCBLU

a. Signification des icônes dans la zone de notification.


Démarrage de l'application	Connexion avec le lecteur en cours	Lecteur connecté	Lecteur déconnecté	Erreur de communication avec le lecteur	Périphériques Bluetooth inaccessible (mode avion)

Lors de la recherche d'un lecteur, l'icône est animée :



b. Le menu


Le clic droit sur l'icône permet d'ouvrir le menu de l'application

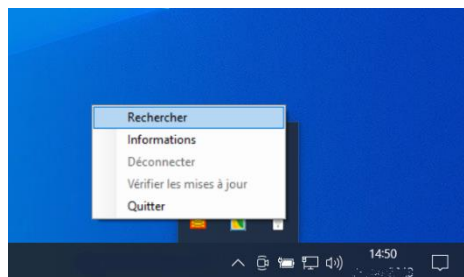

i. Rechercher : permet de rechercher un lecteur DSC-BLU




- ii. **Informations** : permet d'afficher les informations du lecteur et de l'application (numéro de série, versions, ...)

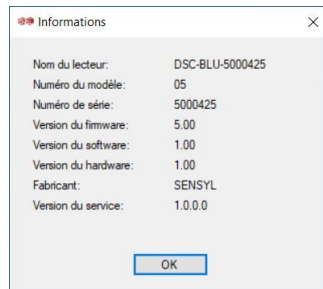

- iii. **Déconnecter** : permet de se déconnecter du lecteur. Si vous souhaitez vous reconnecter de nouveau au lecteur, il faudra relancer une recherche et choisir le lecteur désiré.
- iv. **Vérifier les mises à jour** : permet de vérifier si une mise à jour du lecteur est disponible.

4. Présentation du lecteur DSC-BLU

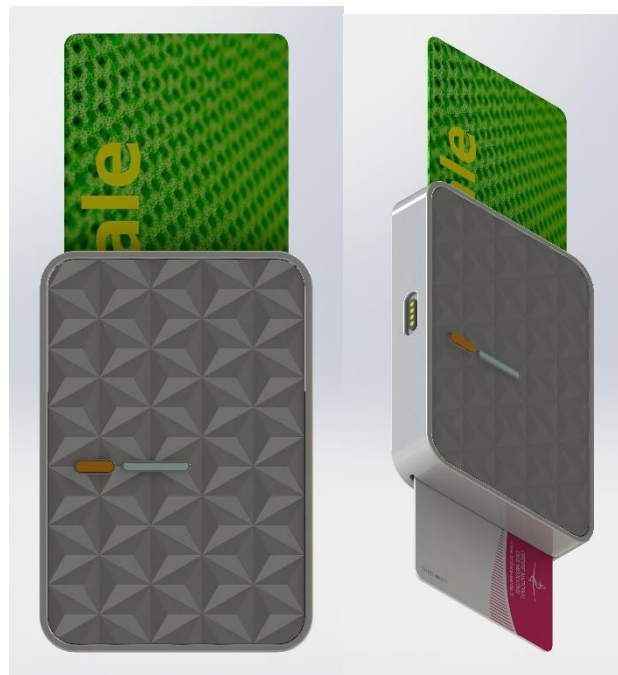

- a. Description du lecteur
 - i. Fente supérieure pour la carte Vitale (puce face à vous)
 - ii. Fente inférieure pour la carte PS (puce face à vous)
 - iii. Bouton marche / arrêt sur la face avant à gauche (bouton orange)
 - iv. Connecteur de charge aimanté (sur le côté gauche)
 - v. Voyant lumineux

- b. Signification du voyant :
 - i. Au démarrage, le voyant exécute un chenillard
 - ii. Un fois démarré, le voyant indique le niveau de batterie, s'il est complètement allumé alors la batterie est totalement chargée
 - iii. Si le voyant clignote, cela signifie que le lecteur n'a pas encore été appairé.
 - iv. Lors de la charge du lecteur, le voyant s'allume de gauche à droite
 - v. Lors d'une lecture de carte, le voyant oscille d'un côté à l'autre.

- c. Allumer le lecteur

Il y a trois possibilités pour allumer le lecteur :

- i. Avec le câble USB magnétique : pendant la charge du lecteur, c'est-à-dire lorsque le lecteur est alimenté par le câble USB (fourni)
- ii. Avec le bouton Marche / Arrêt : le bouton orange présent sur la face avant du lecteur permet d'allumer le lecteur. Pour démarrer le lecteur, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt jusqu'à l'allumage des voyants bleus.
- iii. Avec l'insertion d'une carte Vitale : l'insertion d'une carte Vitale dans le lecteur allumera automatiquement le lecteur.


- d. Eteindre le lecteur / Veille du lecteur

Le lecteur peut être éteint avec le bouton Marche/arrêt par un simple appui à condition que le lecteur ne soit pas en charge et qu'il n'y ait pas de carte Vitale insérée.


Attention ! Un appui prolongé supérieur à 5 secondes sur le bouton Marche / Arrêt réinitialise le lecteur.

5. Premier démarrage

- a. Allumer le lecteur avec le bouton Marche / Arrêt
- b. Lancer une recherche à l'aide du menu de l'application

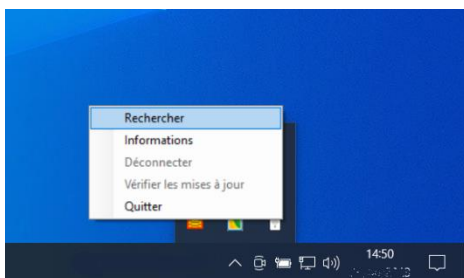

- c. A la première recherche, aucun lecteur DSC-BLU n'est appairé, il faut donc poursuivre la recherche en cliquant sur « Oui »

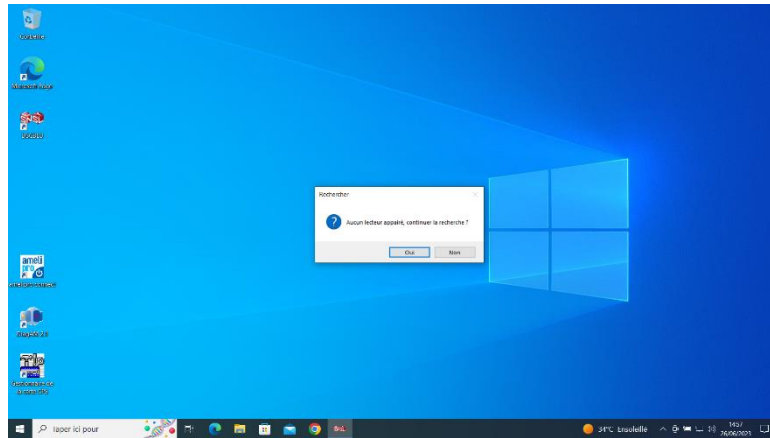

- d. Lorsque le lecteur est détecté, il faut confirmer son utilisation en cliquant sur « Valider »
- e. Après quelques secondes, l'application est connecté au lecteur et l'icône est dans l'état suivant :



6. Si le lecteur n'est pas détecté ou appairé par l'application
 - a. Ouvrir les « Paramètres » de Windows
 - b. Aller dans la rubrique « Périphériques »
 - c. Ajouter un appareil Bluetooth
 - d. Si le lecteur apparait dans liste des appareils détecté alors ajoutez-le.
 - e. Relancer maintenant le recherche à partir du menu de l'application DSC-BLU